


# HALITA® Gratte-langue

Élimine la couche des bactéries produisant les gaz malodorants qui se forment à la surface de la langue. Ses deux faces, l'une au profil ondulé conçue pour s'adapter à la dépression centrale de la langue et l'autre au profil lisse, pour nettoyer les parties latérales, permettent d'effectuer facilement le nettoyage de la langue.

## COMMENT L'UTILISER?

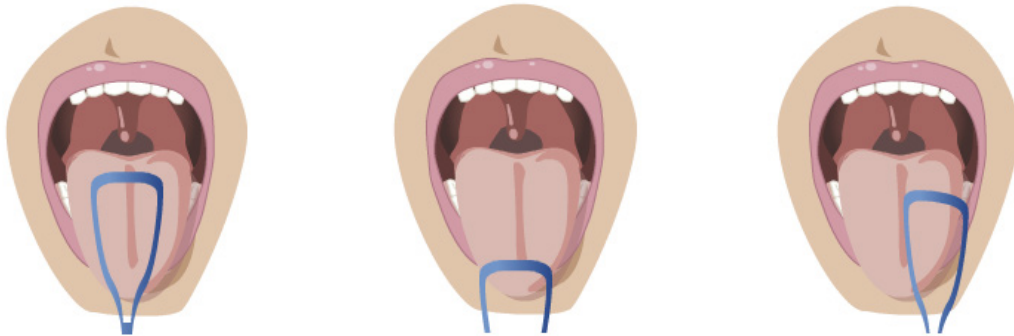

- 1. Commencez par nettoyer la partie centrale de la langue**, à l'aide du profil saillant du gratte-langue. Pour cela, maintenez le gratte-langue par le manche de façon à ce que la partie saillante se trouve en dessous. **Tirez la langue et introduisez le gratte-langue dans la bouche** en essayant d'atteindre la partie la plus éloignée de la langue.
- 2. Glissez le gratte-langue par le centre de la langue**, jusqu'à la partie avant de la bouche. **Rincez le gratte-langue à l'eau.**
- 3. Nettoyez les côtés de la langue** à l'aide de la partie lisse du gratte-langue. Rincez le gratte-langue après chaque passage.



HALITA gratte-langue  
ACL 7379480  
CNK 1546-472

 Vendu en  
pharmacies et  
parapharmacies